



EL DIENTE POSTERIOR

FUNCIONES MÚLTIPLES

Funcionalidad natural -

La interacción entre el tratamiento oclusal y los espacios libres fisiológicos

Con artegral® se llevan a la práctica todos los tratamientos de oclusión de una forma moderna. Sin importar si se realiza el montaje contra antagonistas naturales o artificiales, se puede encontrar con seguridad una solución en la tripodización céntrica.


Experimente la seguridad durante la colocación del diente gracias a las curvas de compensación sagitales y transversales integradas y realice el montaje del mismo de forma sencilla en la posición vertical al centro de la cresta y en el plano oclusal. La corporeidad fiel a lo natural de la estructura de cuatro capas de los dientes posteriores posibilita una gran funcionalidad especialmente en supraconstrucciones o construcciones híbridas.

La colocación de dientes posteriores tiene un soporte eficaz en el contorno de las superficies proximales. Estas superficies conforman un apoyo sagital para el montaje gracias a la cual se ahorra tiempo. El sistema patentado Preventive Shift Groove® (PSG®) reduce los efectos de la contracción de la cera y proporciona también una superficie de mayor amplitud para la unión segura entre el plástico de la prótesis y el diente. Gracias a la estructura basal se hace prácticamente innecesaria la adaptación a la cresta maxilar.

Compatibilidad con el sistema TiF® de colocación de prótesis, los molares inferiores se encuentran en posición vertical con respecto al plano oclusal, para el control sagital es suficiente una plantilla de ángulos de 6°.



FUNCIONES ▶ MÚLTIPLES

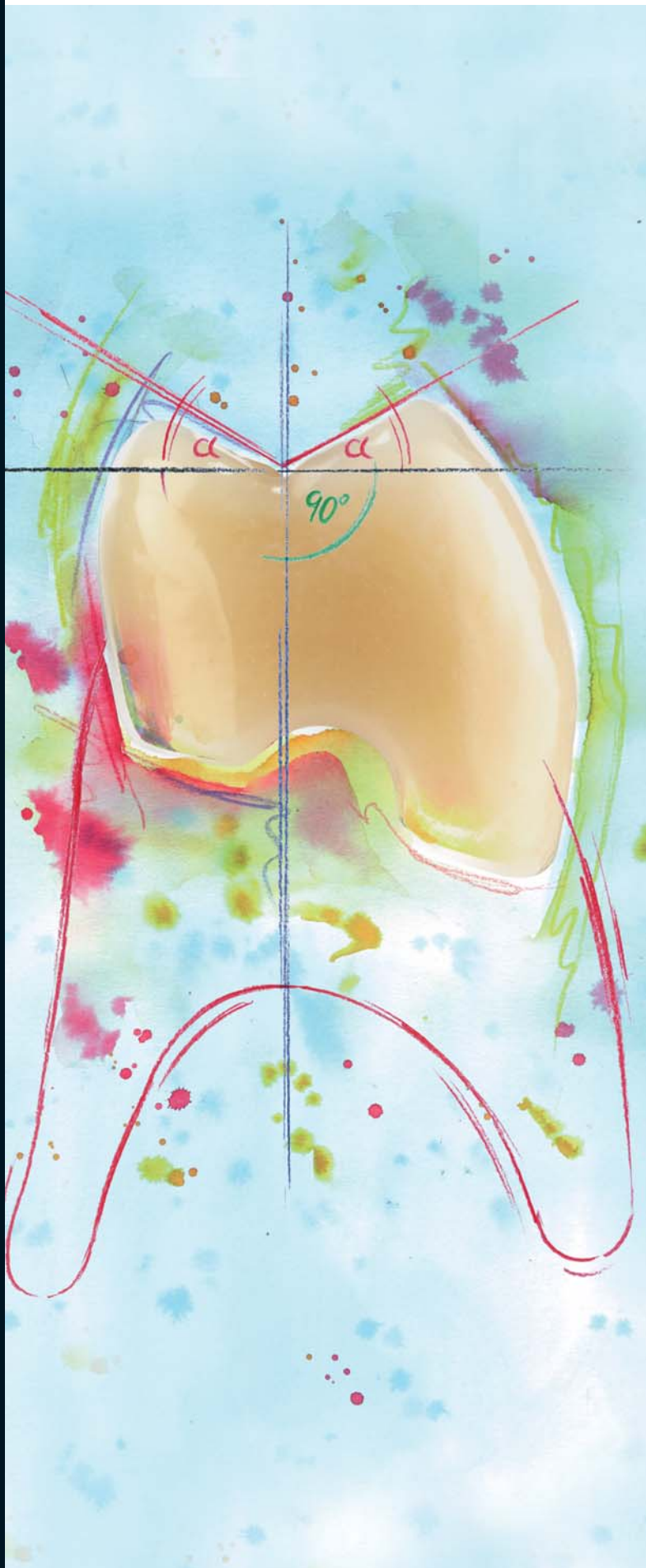

El Miguel Ángel funcional de los dientes

▶ Estética y armonía

Afinidad corporal para uso en supraestructuras o construcciones híbridas.

Proporciones óptimas dentro y entre las arcadas dentales.

Reflejos vivos mediante un relieve de la superficie conformado de forma natural.

▶ Función universal

Curvas de compensación sagital y transversal integradas.

Inclinación moderada de la cúspide con funcionalidad totalmente anatómica.

Posición céntrica tripódica inequívoca para los antagonistas artificiales y naturales.

Empleo universal en las prótesis dentales parciales y en los trabajos actuales de prótesis totales por su óptima adaptación funcional a molares de premolares y segundos molares.

▶ Ahorro de tiempo en el manejo

Orientación vertical -
Dientes posteriores verticales al plano de oclusión.

Montaje de un apoyo sagital auxiliar.

PSG® - Preventive Shift Groove®.

La conformación basal minimiza la difícil adaptación al contorno de la cresta maxilar.

CE 0482

Merz Dental GmbH

Eetzweg 20, D-24321 Lütjenburg
Telefon: +49 (0) 43 81 / 403-417
Telefax: +49 (0) 43 81 / 403-403
www.merz-dental.de
info@merz-dental.de

Merz
Dental

EL MIGUEL ÁNGEL FUNCIONAL

DE LOS DIENTES



[®]
artegral

La tarjeta de forma del sistema CBI[®]

FUNCIONES ▶
MÚLTIPLES





EL DIENTE ANTERIOR

FUNCIONES MÚLTIPLES



Armonía fiel a lo natural - El equilibrio entre luz, color y reflexión

La textura superficial en su perfecta relación con los bordes labiales genera una armonía natural ante el efecto de la refracción de la luz. La integración del trazado natural del borde le imparte una corporeidad nunca antes lograda en dientes artificiales. Gracias a la reproducción casi natural de las superficies proximales se produce un perfil palatino funcional. De esta forma es posible solucionar también situaciones difíciles de mordida profunda sin ampliación de la etapa sagital. La tridimensionalidad de este diente pone de relieve su carácter natural como diente con individualidad propia.

Volumen, solamente allí donde es útil. Gracias a su corporeidad se facilita cubrir los anclajes e implantes. Se le transmite un efecto tridimensional a la colocación de dientes anteriores relevantes.

Por medio del aumento digital de la escala de las formas dentales se posibilitan múltiples combinaciones entre dientes de distintos tamaños y formas. Se logra una estética equilibrada gracias al perfil armónico de la estructura superficial en combinación con un recubrimiento de cinco capas.

Opacidad discreta - consigue un borde incisal matizado en consonancia con la edad del paciente.

artegral

FORMA C

CL

49,8
11,3
8,8



UCL

37,9
11,9
5,9



CM

46,2
10,5
8,2



UCM

35,8
10,9
5,6



CS

44,1
10,4
7,7



UCS

33,6
10,3
5,2



FORMA B

BL

50,3
11,7
9,1



UBL

38,2
10,2
5,7



BM

47,2
10,9
8,6



UBM

36,2
9,8
5,4



BS

44,1
10,1
8,0



UBS

34,0
9,2
5,1



El sistema artegral® CBI®

Las formas de los dientes anteriores naturales se pueden clasificar en tres formas principales:

Forma C = acento cervical	pronunciado, duro, masculino
Forma B = acento en el cuerpo	armonía, neutralidad
Forma I = acento incisal	gracia, elegancia, feminidad

FORMA I



Disponible en todos los 16 colores según VITA A1-D4
La tarjeta de forma es conforme a EN ISO 22112 : 2006

