
OFERTAS



One for all

2 0 1 8

Ivoclar Vivadent SLU
Carretera de Fuencarral nº 24
Europa I - Portal 1 - Planta Baja · 28108 · Alcobendas (Madrid)
Telf. +34 91 375 78 20 Fax: +34 91 375 78 38
www.ivoclarvivadent.es

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

SR Vivodent S PE / Orthotyp S PE

Los nuevos SR Vivodent S PE y SR Orthotyp S PE están fabricados enteramente de polímero DCL altamente reticulado (Doble reticulado). Este material consiste en una variante claramente modificada del polimetil metacrilato en la que tanto el polímero como la matriz están reticulados.

El resultado es un material que muestra una mayor resistencia a la compresión, pero con una flexibilidad similar al PMMA convencional. Por esta razón, se espera que la longevidad de la prótesis aumente. Otra ventaja del material DCL es la fuerte adhesión de los dientes al material de la base de la prótesis.



Colores vibrantes

La nueva línea de dientes se presenta en 20 colores con matices vivos. Su característica intensidad, luminosidad y translucidez replican el color natural de los dientes, dando como resultado prótesis que se mimetizan armónicamente con su entorno. La guía de colores multifuncional está diseñada para cumplir con varias tareas, según lo solicitado por el clínico. Permite que el operador determine no sólo el color, sino también el tamaño de los dientes y la línea de cierre de los labios. Esto se ha logrado gracias a la integración del de dos herramientas de medición integradas para medir la papila y otra para medir la distancia nasal, que nos ayudarán a determinar el tamaño del diente.



Diseño excepcional

Cada una de las 15 formas superiores y 5 inferiores están específicamente diseñadas para adaptarse a las características de cada diente individual:

- Dimensiones naturales
- Curvaturas fisiológicas
- Características superficiales vivas
- Estratificación natural
- Cuellos dentales pronunciados

Por la compra de
100 tablillas
30 tablillas*
+ 5 guías GRATIS

Regalo de guías aplicable solo con autorización de representante de ventas de Ivoclar Vivadent.

GRATIS

Ivostar / Gnathostar

Ivostar diente de tres capas complemento ideal para los linea de dientes posteriors Gnathostar.

Ventajas

- Disponible en colores Chromascop y colores A-D
- Capas armonizadas

Formas de suministro

Colores: A-D, colores Bleach y Chromascop.

Formas: 15 superiores anteriores y
6 inferiores anteriores.
5 formas posteriores.



Por la compra de 100 tablillas
30 tablillas*
+ 5 guías GRATIS

Regalo de guías aplicable solo con autorización de representante de ventas de Ivoclar Vivadent.

GRATIS



SR Phonares II Anterior / Lingual Typ

Las formas de dientes SR Phonares II representan la esencia de la dentición natural.

Cada forma está esculpida para ofrecer un resultado final natural. Le brindan una excelente oportunidad para crear restauraciones dentales inspiradas en la naturaleza.



Estética minuciosamente perfeccionada

- Características superficiales insuperables
- Armoniosa distribución de la translucidez, opalescencia y fluorescencia.

Formas de dientes estratificadas individualmente

Las formas de los dientes están estratificadas específicamente para ajustarlas a las características de cada forma dental individual. La innovadora tecnología de moldeado por inyección empleada en la fabricación de los dientes fusiona de forma impecable las capas dentales individuales. En este proceso se aprovechan de forma óptima las cualidades estéticas naturales.

Por la compra de
90 tablillas
+30 tablillas*

GRATIS

Impresionante funcionalidad

- “Estética blanca” natural con el cierre de espacios interdentes de especial diseño
- Montaje sencillo de los dientes anteriores gracias al diseño de las caras proximales “Set & Fit”

Formato de suministro

SR Phonares® II
18 Formas anteriores superiores
6 Formas inferiores anteriores



SR Vivodent / Orthotyp

El aspecto natural y las excelentes propiedades químicas hablan por la línea de dientes SR Vivodent. La amplia selección de 20 formas superiores y 8 formas A inferiores se basan en las conocidas formas anatómicas de los dientes anteriores Ivoclar Vivodent

Ventajas

Particularmente conveniente para las prótesis combinadas

Formas de suministro

20 formas anteriores según la guía Chromascop,
25 superiores, 10 inferiores, molde A.

Por la compra de 100 tablillas
30 tablillas *
+ 5 guías GRATIS

GRATIS

Regalo de guías aplicable solo con autorización de representante de ventas de Ivoclar Vivodent.



*Productos enviados mediante envío directo

Gracias a estas ofertas podrá recibir los artículos sin cargo, que serán enviados desde nuestra central. Para que pueda beneficiarse de esta oferta deberá enviarnos su factura de compra al correo electrónico promociones.es@ivoclarvivodent.com, para cualquier consulta tiene a su disposición el teléfono 91 375 78 20.

Oferta válida para Laboratorios Dentales desde el 1 de Junio de 2018 al 31 de Agosto de 2018. Sólo para clientes de distribuidores oficiales, no acumulables salvo modificación o error.

Fecha máxima para el envío de facturas 15 de septiembre de 2018.

Tetric CAD



Tetric CAD es un bloque de composite estético para la fabricación eficiente de restauraciones de una sola pieza. Gracias a su logrado efecto camaleónico, las restauraciones de Tetric CAD consiguen una perfecta integración visual con la estructura dental natural. La restauración se pule tras el fresado y luego se asienta usando un protocolo de cementación adhesiva. Esta técnica de procesamiento es muy eficiente y consigue un resultado estético de forma rápida y sencilla. Los bloques se presentan en dos niveles de translucidez: MT en 5 colores (BL, A1, A2, A3 y A3.5) y HT en 4 colores (A1, A2, A3 y A3.5), y en los tamaños I12 y C14.

Indicaciones

- Carillas
- Inlays
- Onlays (p. ej., carillas oclusales, coronas parciales)
- Coronas en la región anterior y posterior

IPS e.max CAD



IPS e.max CAD es la cerámica más vendida del mundo¹. Está indicado para la fabricación eficiente de restauraciones a volumen total y es conocido por sus versátiles opciones de aplicación, un completo rango de indicaciones y por su alta resistencia de 530 MPa².

Tanto sus propiedades estéticas como su durabilidad han sido confirmadas en el día a día de la clínica dental. Como resultado el material puede usarse para la creación de modernas coronas a volumen total de solo 1-mm de grosor, el cual es colocado posteriormente con la técnica adhesiva.

Indicaciones

- Coronas mínimamente invasivas (≥ 1.0 mm)³
- Coronas
- Puentes de tres unidades (hasta el segundo premolar como pilar límite distal)
- Restauraciones híbridas implanto soportadas (pilares híbridos, coronas pilar híbridas)
- Carillas, carillas finas (0.4 mm) y carillas oclusales.
- Inlays, Onlays, Coronas parciales

IPS e.max ZirCAD



- Cámara térmica de infrarrojos integrada para un óptimo proceso de pre secado.
- Horno con función DSA para el análisis digital del color dental.
- Sistema de manos libres Bluetooth integrado.
- Programas de calentamiento en tres pasos y de enfriamiento en dos.
- Asistente de ajuste del brillo.
- Voz acústica en 25 idiomas.
- Funciones multimedia (PDF, imágenes, vídeo y reproductor MP3)
- Tecnología de mufla QTK2 con plataforma reflectora SiC.
- Calibración de temperatura automática de doble rango (ATK2)
- Información en pantalla del progreso y visualizador OSD
- Tecnología de ahorro de energía
- Sistema de protección de fallo de energía.

IPS Empress CAD



- Procesos de sinterización de hasta 1600°C
- Sinterización de estructuras en 75 minutos y estructuras de puentes en 90 minutos.
- Programas rápidos integrados para restauraciones anatómicas completas con una alta translucidez.
- Manejo sencillo gracias a la combinación del teclado de membrana sellada y la pantalla gráfica.
- Tecnología de ahorro de energía
- Diseño compacto y peso de solo 27 kg.
- Posibilidad de calibración
- Pantalla OSD (Optical Status Display)
- Control remoto vía PC/Portátil gracias al software PrograBase3.



Por la compra de 4 reposiciones
Tetric CAD C14 (HT, MT) 5 pzs o
Tetric CAD I12 (HT, MT) 5pzs
GRATIS*
 1 reposición de
Tetric CAD del mismo tamaño

4+1

En usuarios Zenotec Incluye etiquetas para bloques
(5 Sticks)

Por la compra de 4 reposiciones
IPS e.max CAD C14 (HT, MT) 5 pzs
IPS e.max CAD I12 (HT, MT) 5 pzs
GRATIS*
 1 reposición de
Tetric CAD del mismo tamaño

4+1

En usuarios Zenotec Incluye
etiquetas para bloques (5 Sticks)

Por la compra de 3 reposiciones
IPS e.max CAD
GRATIS*
 1 reposición de
IPS e.max CAD MT C14 5 pzs
+ Variolink Esthetic Test Pack
+ Monobond Etch & Prime Test Pack

3+1

Por la compra de 6 reposiciones
IPS e.max CAD C14 o I12
(HT, MT, LT, MO) 5 pzs
GRATIS*
 1 reposición de
IPS e.max CAD C14 o I12
(HT, MT, LT, MO) 5 pzs

6+1

Ofertas válida para conectores CEREC , inLab, Programill y Zenotec




Pack ZirCAD + SpeedCEM Plus

- 3 ud. IPS e.max ZirCAD LT C17 (5 pzs.)
- 1 ud. SpeedCEM Plus 9g. *

PVP Kit.: ~~427.00€~~ PVP Oferta: **322.50€**

24% Dto.

Oferta válida para conectores CEREC , inLab,
 Programill y Zenotec

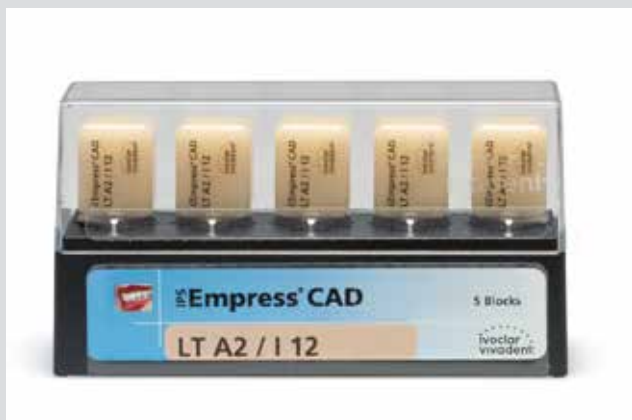

Por la compra de 6 reposiciones
IPS Empress CAD 5 pzs
GRATIS*
 1 reposición de
IPS Empress CAD 5 pzs

6+1

*Productos enviados mediante envío directo

Gracias a estas ofertas podrá recibir los artículos sin cargo, que serán enviados desde nuestra central. Para que pueda beneficiarse de esta oferta deberá enviarnos su factura de compra al correo electrónico promociones.es@ivoclarvivadent.com, para cualquier consulta tiene a su disposición el teléfono 91 375 78 20.

Oferta válida para Laboratorios Dentales desde el 1 de Junio de 2018 al 31 de Agosto de 2018. Sólo para clientes de distribuidores oficiales, no acumulables salvo modificación o error. Fecha máxima para el envío de facturas 15 de septiembre de 2018.

IPS e.max Press



IPS e.max Press es la legendaria cerámica vítrea de disilicato de litio (LS2) para la tecnología de inyección. Las pastillas están disponibles en cinco niveles de translucidez y una versión Impulse. Las pastillas policromáticas. Las restauraciones se recubren o caracterizan usando los materiales cerámicos de estratificación IPS e.max Ceram coordinados o los innovadores maquillajes IPS Ivocolor. Los resultados son muy naturales, independientemente del color de la pieza preparada.

Materiales de cementación probados




Las restauraciones de IPS e.max Press pueden colocarse con distintos materiales de cementación probados, que están disponibles para una gran variedad de indicaciones. Las coronas y puentes hechos con IPS e.max Press pueden colocarse con los protocolos de cementación autoadhesiva y convencional (por ejemplo, SpeedCEM Plus). Inlays, carillas finas, carillas oclusales y coronas de 1 mm mínimamente invasivas se colocan con la técnica adhesiva (por ejemplo, usando Variolink Esthetic).

Ventajas



- Material de elevada resistencia probada para conseguir unos resultados clínicos duraderos con opciones de cementación flexibles
- Estética natural, con independencia del color de la pieza dental preparada
- Pastillas policromáticas Multi para una eficiencia superior
- Cinco niveles de translucidez y pastillas Impulse adicionales para una flexibilidad máxima
- Restauraciones mínimamente invasivas con gran precisión de ajuste
- Opciones de cementación adhesiva, autoadhesiva o convencional dependiendo de la indicación

Indicaciones

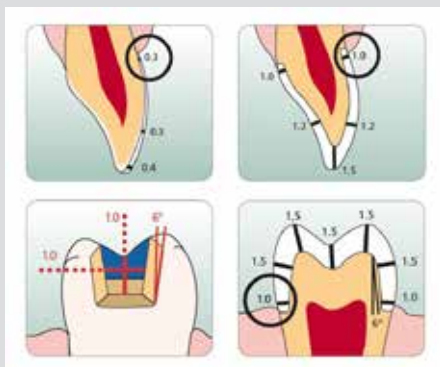

- Carillas finas (0,3 mm), carillas
- Carillas oclusales
- Inlays, onlays, coronas parciales
- Coronas mínimamente invasivas (≥ 1 mm)
- Puentes de tres unidades (hasta el segundo premolar como pilar terminal)
- Pilares híbridos y coronas con pilares híbridos

IPS e.max[®]

IPSe.max[®] Press – EL ORIGINAL



Por la compra de 6 reposiciones

IPS e.max Press Refill 5 pzs

GRATIS*

1 reposición de

IPS e.max Press Refill 5 pzs

5+1

***Productos enviados mediante envío directo**

Gracias a estas ofertas podrá recibir los artículos sin cargo, que serán enviados desde nuestra central. Para que pueda beneficiarse de esta oferta deberá enviarnos su factura de compra al correo electrónico promociones.es@ivoclarvivadent.com, para cualquier consulta tiene a su disposición el teléfono 91 375 78 20.

Oferta válida para Laboratorios Dentales desde el 1 de Junio de 2018 al 31 de Agosto de 2018. Sólo para clientes de distribuidores oficiales, no acumulables salvo modificación o error. Fecha máxima para el envío de facturas 15 de septiembre de 2018.

Un sistema - muchas aplicaciones



Por respeto a la salud

Gracias a las unidades predosificadas, los usuarios obtienen unas proporciones de mezcla constantes y exactas. Además, se evita el contacto directo entre piel y monómero.

Alta precisión



Alta precisión gracias a la compensación de contracción

El flujo constante de material compensa la contracción volumétrica durante el proceso de polimerización.

El resultado: ajuste preciso, excelente acabado, alto lustre basal.

Productos de calidad de un único fabricante

Los dientes apropiados para cada indicación. Para la creación de dentaduras postizas con IvoBase se recomienda la gama de piezas dentales altamente estéticas y funcionales SR Phonares® II.

Proceso fiable



El proceso automatizado ofrece fiabilidad

Se puede calcular y es fácil de obtener un estándar de alta calidad: se colocan recipiente y material en la unidad, se selecciona el programa y se pone en marcha. Los usuarios gozan de un elevado y constante nivel de calidad y precisión.

Contenido de monómero residual < 1%

El contenido de monómero residual estándar de IvoBase está al nivel de los materiales termopolimerizables. Mediante la función RMR, este valor crítico se reduce claramente: por debajo del 1%.

Reducción de la emisión

Sin baño de agua ni aire comprimido: todo lo que necesita es una conexión eléctrica. El sistema IvoBase se reduce a lo esencial y evita emisiones innecesarias.

Proceso efectivo



Preparación



Mezclado



Carga del inyector



Selección del programa



Excelente resultado

Sistema IvoBase®

Preciso | Respetuoso con los tejidos | Totalmente automático



Pack IvoBase:

- 1x IvoBase Injector 100-240V/50-60Hz
- 1x IvoBase Set Muffle*
- 1x IvoBase Hybrid Kit 20 Pink-V*
- 1x IvoBase HI Kit 20 Pink-V*

PVP Rec:
~~8.121,5€~~

PVP Oferta:
5.232,5€

36%
Dto.

*Productos enviados mediante envío directo

Gracias a estas ofertas podrá recibir los artículos sin cargo, que serán enviados desde nuestra central. Para que pueda beneficiarse de esta oferta deberá enviarnos su factura de compra al correo electrónico promociones.es@ivoclarvivadent.com, para cualquier consulta tiene a su disposición el teléfono 91 375 78 20.

Oferta válida para Laboratorios Dentales desde el 1 de Junio de 2018 al 31 de Agosto de 2018. Sólo para clientes de distribuidores oficiales, no acumulables salvo modificación o error. Fecha máxima para el envío de facturas 15 de septiembre de 2018.