



CADA DÍA, UN NUEVO DESAFÍO

OFERTAS OTOÑO - INVIERNO 2021
Válidas del 15 de septiembre al 15 de diciembre

bre.LUX POWER UNIT 2

Desata la fuerza de la luz


15% DTO.

CÓD. OFERTA:
BRPRO_01

REF: BR14001000

2.585,00 €

2.197,25 €

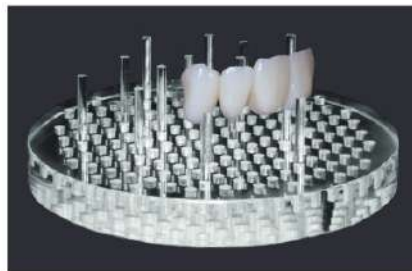

Experimente una nueva sensación de seguridad y velocidad al polimerizar sus trabajos. La innovadora tecnología LED de la lámpara bre.Lux 2 aprovecha todo el espectro de luz relevante hasta valores inferiores a los 400 nm, lo que conduce a una nueva dimensión en la calidad de la polimerización. Conseguirá una polimerización más homogénea y rápida, pues las diferentes longitudes de onda alcanzan diferentes profundidades. Aumente la seguridad, reduzca los tiempos.

Cuenta con 72 lámparas LED que, aprovechando una intensidad de luz imbatible y de gran eficiencia, evita todo tipo de contracciones.

Además, el control de la temperatura entre 45 y 55 °C preserva los trabajos de impactos por efectos térmicos, tales como el sobrecalentamiento o la fragilización.

El ruido del ventilador es de un volumen casi inaudible.

bre.LUX POWER UNIT 2 + LÁMPARA DE MANO

15% DTO.

CÓD. OFERTA:
BRPRO_01

REF: BR14001015

3.042,00 €

2.585,70 €



bredent

BIONICUT ACE SNAP

La solución para férulas funcionales estéticas con la técnica Snap-On

Especialmente desarrollado para la técnica Snap-On para la corrección de la mordida así como para trabajos provisionales. Alta estabilidad dimensional y gran resistencia al desgaste. Puede mantenerse en boca 24 horas al día.

Resistencia a la flexión 85MPa, módulo de elasticidad 2.600Mpa

VENTAJAS

- Biocompatible
- Sin monomero
- Estético
- Neutro al sabor
- Estético
- Protege el antagonista
- Posibilidad de reducción al mínimo de los grosores
- Alta estabilidad
- Gran resistencia al desgaste
- Fácil repasado



15% DTO.

CÓD. OFERTA:
BRPRO_02

Bionicut ACE Snap

A2 20mm 98,5mm
REF: BR54003700

~~123,00 €~~

104,55 €

15% DTO.

CÓD. OFERTA:
BRPRO_03

breCAM.splint
98,5 x 25mm
REF: BR54002325

~~32,50 €~~
27,63 €

breCAM.splint
98,5 x 20mm
REF: BR54002320

~~29,90 €~~
25,42 €

breCAM.splint
98,5 x 15mm
REF: BR54002315

~~29,50 €~~
25,08 €

breCAM.splint
95 x 16 mm ZZ - clear
REF: BR54002516

~~38,50 €~~
32,73 €

breCAM.splint
95 x 20 mm ZZ - clear
REF: BR54002520


~~39,90 €~~
33,92 €

breCAM SPLINT

PMMA quimioplástico, especial para la confección de plantillas para la perforación, tabletops y férulas de descarga, que además puede utilizarse en la técnica de colado de metal gracias a que es calcinable.

VENTAJAS

- 2 años de uso - buena aceptación y valoración del producto por parte de los pacientes
- Excelente biocompatibilidad - amplio espectro de aplicación
- Ajuste de precisión óptima, sin tensiones por contracción
- Material transparente - férulas de aspecto atractivo
- Buena elasticidad - cómodo de llevar, riesgo bajo de rotura
- Reproducible con CAD/CAM, utilización del articulador virtual y diagnóstico digital de la funcionalidad
- Calcinable sin dejar residuos, aplicaciones múltiples del producto (de manera directa o indirecta)

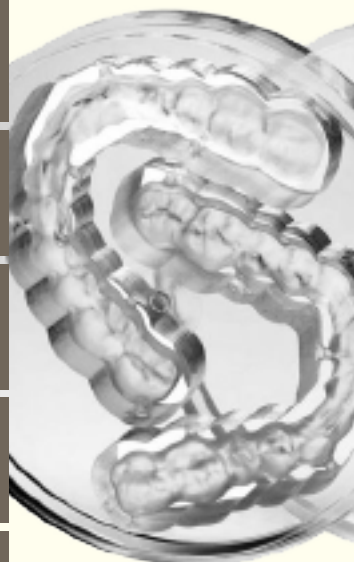

bredent



breCAM BIO HPP

Polímero de alto rendimiento (PEEK) con partículas de relleno cerámicos

El material PEEK ya se ha venido utilizando en medicina desde hace mas de 35 años para prótesis artificiales (prótesis para articulaciones de dedos, discos intervertebrales y prótesis de la articulación de la cadera).

Este material está dotado de una alta biocompatibilidad, lo que le permite osteointegración. Además, sus propiedades mecánicas son comparables a las del tejido óseo.

El BioHPP es un polímero parcialmente cristalino, termoplástico y de alto rendimiento. Está basado en PEEK (polieteretercetona) al que se han añadido micro-partículas cerámicas inorgánicas con un diámetro de <math><0,5 \mu\text{m}</math>. De esta forma, se conserva la elasticidad física.

Solo BioHPP alcanza el equilibrio óptimo entre:

- . Elasticidad y rigidez
- . Resistencia al peso y la rotura
- . Fisiología y neutralidad a la placa

breCAM HIPC

HIPC son las siglas de "High Impact Polymer Composite", un material DEFINITIVO. BreCAM.HIPC es un composite amorfo con retícula cuadrículada, por lo que ofrece unas características físicas obviamente superiores a las del PMMA convencional. Su fabricación se lleva a cabo aplicando presión y calor de forma similar a los dientes prefabricados de resina, a unos 120 °C y 250 bar de presión. La ausencia de cristal dental y resina polimerizada garantiza una gran consistencia del color y resistencia a la placa (comparable a la de los revestidos directos cerámicos o la cerámica inyectada). HIPC proviene del desarrollo del sistema visio.lign y se corresponde químicamente con las carillas de revestimiento novo.lign, de modo que este material resulta extraordinario en los sustitutos dentales.

10% DTO.

CÓD. OFERTA:
BRPRO_04

breCAM.BioHPP
REF: BR54002030
Dentin shade 2
REF: BR54002070

98.5 x 16mm

~~302,00€~~

271,80 €

breCAM.BioHPP
REF: BR54002031
Dentin shade 2
REF: BR54002071

98.5 x 20mm

~~318,00€~~

286,20 €

breCAM.BioHPP
REF: BR54002032
Dentin shade 2
REF: BR54002072

98,5 x 24mm

~~336,00€~~

302,40 €

breCAM.BioHPP
REF: BR54002091
Dentin shade 2
REF: BR54002101

95 x 20mm ZZ

~~290,00€~~

261,00 €

breCAM.BioHPP
REF: BR54002111
Dentin shade 2
REF: BR54002121

98 x 20mm AG

~~290,00€~~

261,00 €

10% DTO.

CÓD. OFERTA:
BRPRO_05

bre.CAM HIPC
16mm W-ZZ-AG
REF: BR54003???

~~188,00€~~

169,20 €

bre.CAM HIPC
20mm W
REF: BR54003???

~~204,00€~~

183,60 €



bredent

breCAM MULTICOM / MONOCOM

Para restauraciones provisionales de larga duración, para un uso de hasta dos años.

Monocolor: breCAM.monoCOM, base de polimetilmetacrilato con bajo contenido en materiales de relleno.

Multicapa: breCAM.multiCOM, base de polimetilmetacrilato y aproximadamente un 20 % de materiales cerámicos de relleno con el fin de aumentar su resistencia. Aquí se ha incorporado material de relleno inorgánico (partículas de cerámica) a la matriz de resina de PMMA orgánico. El recubrimiento policromo de breCAM.multiCOM confiere a los sustitutos dentales una tonalidad natural del color. Provisional de gran estética con escasos costes de material y poco tiempo de trabajo.



10% DTO.

CÓD. OFERTA:
BRPRO_06

breCAM Monocom
16mm W
REF: BR54003???

54,50-€
49,05 €

breCam Monocom
20mm W
REF: BR54003???

60,00-€
54,00 €

breCam Multicom
16mm W-ZZ
REF: BR54003???

102,00-€
91,80 €

breCam Multicom
20mm W-ZZ-AG
REF: BR54003???

113,00-€
101,70 €

BRE. CAM CUTTER

TP PMMA/PEEK/Composite

Geometría de vanguardia.
Procesamiento de materiales termoplásticos a alta velocidad de fresado

ZR óxido de circonio

Recubrimiento especial de diamante (CVD) de larga duración para fresar óxido de circonio

NE cromo - cobalto

Recubrimiento especial antidesgaste Diatit Micro Finish para fresado de metales



10% DTO.

CÓD. OFERTA:
BRPRO_07

Bre cam Cutter TP
REF: BR???B1PN??

63,90-€
57,51 €

Bre cam cutter Zr tipo 1
REF: BR???B2Z???

74,90-€
67,41 €

Bre cam cutter Zr tipo 2
REF: BR???B2ZN??

50,90-€
45,81 €

Bre cam cutter Zr tipo 3
REF: BR65?B2ZD??

94,50-€
85,05 €

Bre cam cutter Zr tipo 4
REF: BR653B2ZN06

60,90-€
54,81 €

Bre cam cutter NE tipo 1
REF: BR3??B2ND???

67,50-€
60,75 €

Bre cam cutter NE tipo 2
REF: BR650B2ND???

74,90-€
67,41 €

Bre cam cutter NE tipo 3
REF: BR650T4ND???

87,90-€
79,11 €

Disponible para los principales sistemas del mercado, consulte con su asesor comercial



MULTISIL-MASK SOFT

Silicona para falsa encía.

El color natural de la encía falsa ayuda en la coloración de los frentes estéticos.

Al modelar los cuellos se aprecian inmediatamente.

Las propiedades de la silicona, permiten una aplicación directa en la impresión o la llave.

Envase de 1x50 ml cartucho.

15% DTO.

CÓD. OFERTA:
BRPRO_08

Multisil-Mask soft
REF: BR54001047

25,50 €
21,68 €



CEPILLO ABRASO SOFT

Especial para el brillo de resina.

Fabricado con pelo blanco y fibra en el interior.

Diametro 80mm.

La fibra recoge más cantidad de piedra pómez, repartiendola más lentamente sobre la superficie.

Reduce el tiempo de pulido hasta un 50%, haciéndolo así más efectivo.

La fibra reduce la reacción de calor.

Envase de 1 unidad.

10% DTO.

CÓD. OFERTA:
BRPRO_09

Abraso Soft Acrylic
Pelo blanco + fibra 80mm
REF: BR35000800

9,80 €
8,82 €

ZI.FINISH KIT


La solución más fácil para conseguir un pulido de superficies de circonio realizable en dos pasos

15% DTO.

CÓD. OFERTA:
BRPRO_10

Zi-finish
kit de 8 piezas
REF: BR33000836

141,00€
119,85 €

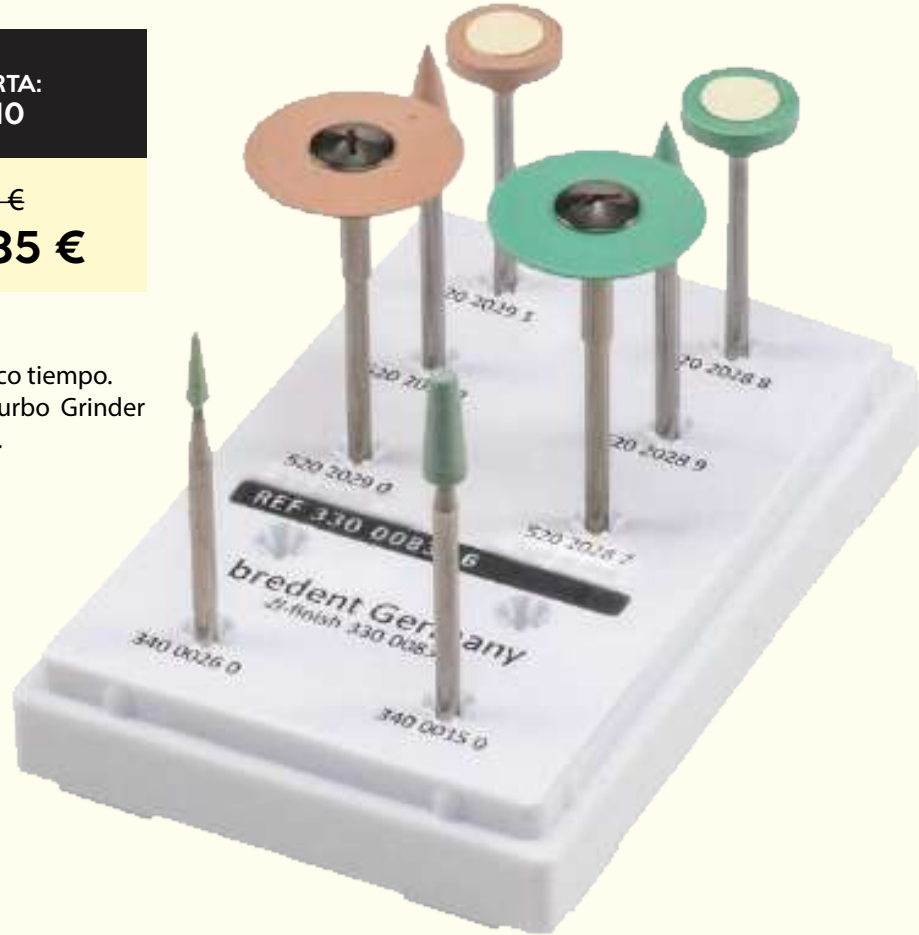

Permite conseguir un brillo intenso perfecto en poco tiempo. En combinación con las eficaces fresas Diagen turbo Grinder facilita la confección de construcciones de circonio.

INCLUYE:

- . 1 Lenteja prepulido
- . 1 Rueda prepulido
- . 1 Cono agudo prepulido
- . 1 Lenteja brillo intenso
- . 1 Rueda brillo intenso
- . 1 Cono agudo brillo intenso
- . 1 Cono Diagen-Turbo-Grinder
- . 1 Cono agudo Diagen-Turbo-Grinder

FULL RANGE BONDING KIT

Conexión segura entre todos los materiales protésicos

El adhesivo DTK esterilizable y de curado dual proporciona una unión segura y duradera entre todos los materiales protésicos. Resulta ideal para aditamentos de coronas personalizados y unidos mediante adhesión.



CÓD. OFERTA:
BRPRO_11

Full range bonding kit
REF: BR5400BOND

480,00€
399,50 €

INCLUYE:

- . 1 DTK-adhesivo opaco
- . 1 DTK-adhesivo transparente
- . 1 K-imprimación 1 visio.link
- . 1 MKZ Imprimación
- . 10 cánulas para mezclado + tip intraoral
- . 12 cuencos de plástico para Silano Pen
- . 1 FGP-Sellador
- . 2 tornillos de fijación M1,4
- . 1 bloque para mezclas
- . 1 soporte pincel negro recto
- . 10 pinceles dentales (un sólo uso)

bredent



CERAMBOND

Bonding universal ya mezclado.
Para una mayor seguridad en todas las aleaciones.

**7GR. SIN CARGO
POR LA COMPRA DE 30GR.**

CÓD. OFERTA:
BRPRO_12

Ceram-Bond 30gr
REF: BR52000322

227,00 €

Ceram-Bond 7gr SIN CARGO
REF: BR52000323

60,50 €



El material ya mezclado y listo para usar Ceram-Bond sustituye la cocción de oxidación al realizar la estratificación de estructuras de metal. Pincelar Ceram-Bond tras haber repasado, arenado y limpiado la estructura de metal.

La capa microfina refuerza la unión entre la cerámica y la estructura de metal, protege frente al descascarillamiento y proporciona un plus de seguridad.

DENTAPLAST KFO

Resina para la realización de placas y demás trabajos de ortodoncia con la técnica sal/pimienta.

Alta resistencia a la rotura y mínima contracción al polimerizar posibilitan obtener un ajuste óptimo. Extremadamente estable.

CÓD. OFERTA:
BRPRO_13

Dentaplast KFO 1kg
REF: BR54000187

114,00 €

Dentaplast KFO 500ml
REF: BR54000186

99,50 €



breident



TOP.LIGN PROFESSIONAL KIT INTRODUCCIÓN

Resina autopolimerizante de color diente.
Para la confección eficiente de soluciones provisionales
de larga duración y sustitutos dentales definitivos.

VENTAJAS

- . Provisional y definitivo
- . Resistente a la rotura y fisiológico
- . Resistente a la tinción y la placa
- . Pulido excelente y cantos resistentes
- . Estético
- . Fiable y eficaz

25% DTO.

CÓD. OFERTA:
BRPRO_14

top.lign prof. Start Set
11x (40gr) + 1 x (100 ml)
REF: BRPROSET01

278,00€
208,50 €

TOP.LIGN PROFESSIONAL + MONÓMERO



15% DTO.

CÓD. OFERTA:
BRPRO_15

top.lign professional
liquidC+B resin 100ml
REF: BRPROLIQ01

53,90€
45,82 €

top.lign professional 40gr
REF: BRPRO?????

23,50€
19,98 €

CÓD. OFERTA:
BRPRO_16

top.lign professional
liquid C+B resin 500ml
REF: BRPROLIQ05

239,00€
209,13 €

top.lign professional 80gr
REF: BRPRO?????

42,50€
37,19 €

TOP.LIGN PROFESSIONAL

10% DTO.

CÓD. OFERTA:
BRPRO_17

top.lign professional 200gr
REF: BRPRO?????

87,90€
79,11 €

Trabajo dental provisional

- Puentes de carga inmediata sobre implantes o dientes naturales también para trabajo provisionales de larga duración (uso durante > 6 meses)
- . Fijo y removible
- . Con y sin carillas de revestimiento
- . Con y sin soporte de estructura

Prótesis definitiva

- Trabajo dental implantosoportado
- . Removible y parcialmente removible
- . Con carillas de revestimiento, dientes completos o crea.lign
- Prótesis parciales y totales
- . Trabajos telescópicos
- . Esqueléticos

bredent



UNI.LIGN

Resinas de altas prestaciones para prótesis.

El sistema Uni.Lign cubre todas las técnicas de procesamiento tanto auto como termopolimerizable (Speed, llave de silicona, inyección y prensado.)

Resultados de ajuste preciso y procesamiento rápido y sencillo gracias a:

- bajos valores de contracción.
- relación uniforme de los componentes de la mezcla.
- eliminación de las burbujas
- excelentes propiedades de Pulido.

Combinación perfecta entre estabilidad y elasticidad gracias a una resistencia a la flexión de 90Mpa y un módulo de elasticidad de 2.200Mpa.

15% DTO.

CÓD. OFERTA:
BRPRO_18

UNI LIGN 70gr
REF: BRUNI?????

19,40€
16,49 €

UNI LIGN LIQUID 100ml
REF: BRUNI?????

21,50€
18,28 €

CÓD. OFERTA:
BRPRO_19

UNI LIGN HEAT SPEED 500gr
REF: BRUNISP???

56,90€
49,79 €

UNI LIGN 500gr
REF: BRUNIP????

58,50€
51,19 €

UNI LIGN LIQUID 500ml
REF: BRUNIL0500
UNI LIGN CAST 500ml
REF: BRUNILC500

47,50€
41,56 €

UNI LIGN HEAT LIQUID 500ml
REF: BRUNIHQ05

41,50€
36,31 €

UNI LIGN SPEED LIQUID 500ml
REF: BRUNISPLQ5

45,90€
40,16 €

10% DTO.

CÓD. OFERTA:
BRPRO_20

UNI LIGN HEAT SPEED 1000gr
REF: BRUNI?????

98,90€
89,01 €

UNI LIGN 1000gr
REF: BRUNI?????

101,00€
90,90 €

UNI LIGN LIQUID 1000ml
REF: BRUNIL1000
UNI LIGN CAST 1000ml
REF: BRUNILC000

87,90€
79,11 €

UNI LIGN HEAT LIQUID 1000ml
REF: BRUNIHQ10

76,90€
69,21 €



breident



bredent



Consulte a su distribuidor más cercano